


MEPHISTO 12 Entwässerungsautomat TP 12

MEPHISTO 16 Entwässerungsautomat TP 14

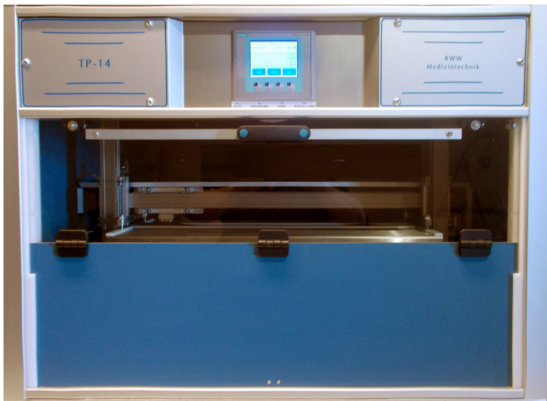

Entwässerungsautomat mit 12 oder 14 Stationen.
Kapazität: 100 oder 300 Kassetten.
Alternativ im Kurzprogramm bis zu 1500 Biopsien täglich.

Bis zu 6 Stationen beheizbar, außer Paraffin können auch Xylol und Formalin beheizt werden.

6 Programme frei wähl- und speicherbar.





Agitation einstellbar.

Wochenendprogramm mit bis zu 99 Stunden Startverzögerung.

Notstromversorgung zur Sicherung der Gewebeprobe.

Anschluss an eine Laborseitige Abluft möglich.

Keine Ventile, keine verstopften Leitungen, keine Reinigungsflüssigkeiten, kein Reinigungsprogramm, keine Wartungskosten, ein Eingreifen in das laufende Programm ist jederzeit möglich.

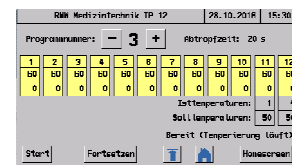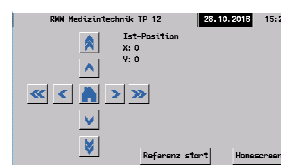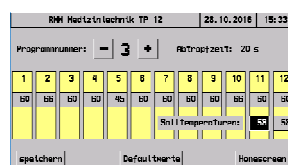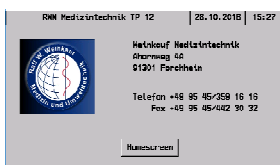

Intuitiv bedienbare Programmieroberfläche.



Einfacher Lösungsmittelwechsel.
Die Gerätefront lässt sich komplett öffnen.

Technische Daten:
Maße: B1100 x T 600 x H 769
Maße: B 895 x T 630 x H 769mm
Reagenzien Behälter: Edelstahl 3,5 Liter
Stromversorgung: 230V / 50Hz / 1,2KW
Gewicht: 66 Kg / 77Kg

Qualität Made in Germany