


Paraffin-Ausgießstation




Modulare Ausgießstation
 Paraffinspendereinheit mit 2 heizbaren Wannen für Kassetten und / oder Ausgießformen, regelbarem Paraffinauslauf, Beleuchtung, Lupe und Kühlpunkt.
 Fassungsvermögen Paraffinvorratstank 4,5 Liter.
 Integrierte Wochenzeitschaltuhr.
 Technische Daten:
 Spendereinheit: B560 x T640 x H400mm, 230V/50Hz/1KW
 Max. 70°C, 4,5 Liter Paraffinvorratstank
 Artikel Nr.: AGS20

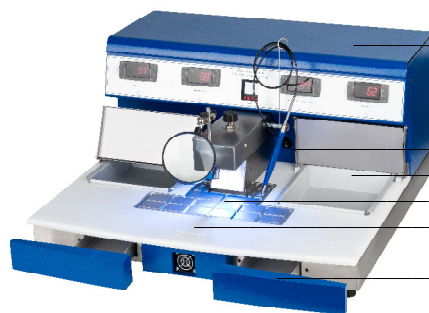


Großer 4,5 Liter Paraffintank

Anschluss für eine heizbare Pinzette
 Kassettenwanne (160x190x40mm)
 Beleuchtung
 Kühlpunkt

beheizte Schubladen

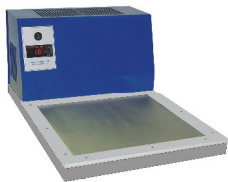


Optional:
 Kühleinheit zum kühlen der Kassetten bis max. -13°C.
 Kühleinheit: B300 X T540 x H400mm, 230V/50Hz/0,4KW
 Max. -13°C.
 Artikel Nr.: AGS20KP

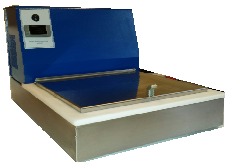

Optional:
 Eine zusätzliche heizbare Wanne zur Aufnahme der Kassetten, großgenug um die meisten Körbe herkömmlicher Entwässerungsautomaten aufzunehmen.
 Wärmeeinheit: B300 X T600 x H400mm, 230V/50Hz/0,4KW
 Max. 70°C, Kapazität 2,5 Liter
 Artikel Nr.: AGS20WP

Verschiedene Heizbare Pinzetten

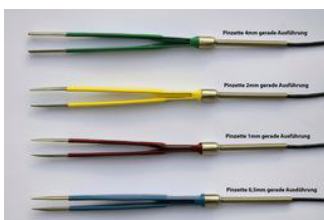

Qualität Made in Germany

Cassettes Trim



Einbettkassetten Reinigungsgerät

Reinigt die Kassetten nach dem Ausgießen von überschüssigem Paraffin um ein problemloses Einsetzen in die Spannklammer des Mikrotoms zu ermöglichen.

Vorteile:

Kein Kratzen mit dem Messer mehr nötig.
 Keine herumfliegenden Paraffinreste
 Keine verkratzten Nummern oder Barcodes.

Technische Daten:

Gewicht: 2,7Kg
 Maße: 240 x 160 x 170mm (T/B/H)
 Temperatur: max. 75 °C
 230V 50Hz 0,1 KW
 Artikel Nr.: CT200