



Ralf W. Weinkauf
Medizin und Umwelttechnik

Ahornweg 4a
91301 Forchheim

Tel. 0 91 91/970 661
Fax 0 91 91/970 665

www.weinkauf-medizintechnik.de
info@weinkauf-medizintechnik.de

Brutschrank / Objektträger Trockner




Platzsparendes Tisch oder Wandmodell

- Merkmale:**
- Temperatur: Raumtemperatur bis + 70 Grad
 - Temperatureinstellung: +/- 1 Grad
 - Eingebauter Ventilator
 - Istwert Anzeige am LCD Display
 - Edelstahl Innenkorpus
 - 2 Edelstahleinlagen herausnehmbar / höhenverstellbar
 - Auffangwanne Edelstahl

Technische Daten: Außenmaße: 340x345x525 mm (B/T/H)
Innennutzmaße: 230x275x325 mm (B/T/H)
Betriebsspannung: 230 V / 50Hz / 100 W
Leistungsaufnahme: 100 VA
Gewicht: 28 kg
Artikel Nr.: 90002

Absaughaube Eco Flux 80 / 110

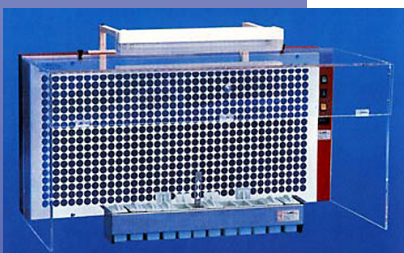

Eco Flux bestehend aus Absaugung sowie Acrylglas-Schutzhaube

- Merkmale:**
- Eine ideale, mobile Absaughaube für die Handfärbung, Formalin Abfüllung oder ähnliche Tätigkeiten, bei denen mit Substanzen gearbeitet wird und einzuhaltende MAK-Werte vorgeschrieben sind.
- Die Tischabsaugung ist für den Umluftbetrieb entwickelt und mit einem Filterpaket mit jeweils 10 kg Aktivkohle ausgerüstet. Ein leises 2-stufiges Gebläse sorgt für die notwendige Absauggeschwindigkeit zum Abtransport von Luftverunreinigungen.
- Gerätegehäuse Metall epoxyd beschichtet
 - laufruhiges 2-Stufen Gebläse
 - Digitale Laufzeitanzeige
 - Vorfilter
 - Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb
 - Geräteleuchte 20 Watt

Technische Daten: Gerätemaß Eco 80: 800x600x550 mm (B/T/H)
Gerätemaß Eco 110: 1100x650x550 mm (B/T/H)
Arbeitsraum Eco 80: 780x400x540 mm (B/T/H)
Arbeitsraum Eco 110: 1080x450x540 mm (B/T/H)
Luftgeschwindigkeit: 0,30 m/s-0,70 m/s
Filter: 1 / 2 St. 10 kg Füllgewicht
Leistung: 230 V / 50 Hz / 250 W / 125 W
Gewicht: 48 / 60 kg
Artikel Nr.: ECO 80 oder ECO 110



Ralf W. Weinkauff
Medizin und Umwelttechnik

Ahornweg 4a
D-91301 Forchheim

Tel. +49 91 91/970 661
Fax +49 91 91/970 665

www.weinkauff-medizintechnik.de
info@weinkauff-medizintechnik.de

Incubator / Slide Dryer

Space saving table top unit




- Features:**
- Temperature: Room temperature till + 70°C
 - Temperature adjustment: +/- 1°C
 - Ventilation system
 - Digital display
 - Inside walls stainless steel
 - 2 stainless steel shelf, height adjustable
 - Stainless steel drip pan

Technical Data:

Dimensions outside: 340x345x525 mm (L/D/H)
Dimensions inside: 230x275x325 mm (L/D/H)
Power supply: 230 V / 50Hz / 100W
Weight: 28 kg
Order No.: 90002

Extractor Hood Eco Flux 80 / 110

Eco Flux consist of exhaustion and plexiglas safety hood

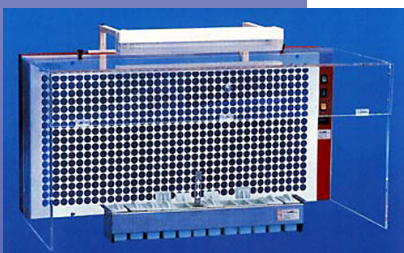

- Features:**
- It is an ideal mobil extractor hood for manual staining, Formalin filling or similar activities.
- The table top extractor hood is special manufactured as a recirculating air operation system with an active-coal-filter system. Two times 10 kg active coal and a silent two speed ventilation system guarantees cleaned air.
- Silent two speed ventilation system
 - Digital hour meter
 - Prefilter
 - Recirculating air operation system
 - Lamp 20 Watt

Technical Data:

Dimensions Eco 80: 800x600x550 mm (L/D/H)
Dimensions Eco 110: 1100x650x550 mm (L/D/H)
Working area Eco 80: 780x400x540 mm (L/D/H)
Working area Eco 110: 1080x450x540 mm (L/D/H)
Airspeed: 0,30 m/s-0,70 m/s
Filter: 1 / 2 St. 10 kg Filling weight
Power supply: 230 V / 50 Hz / 250 W / 125 W
Weight: 48 / 60 kg
Order No.: ECO 80 or ECO 110