

Formalin Abfüllgerät


Abfüllgerät für Versandgefäße



Der Flüssigkeits-Dispenser mit integriertem Abzugssystem ist die optimale Lösung zum Abfüllen von Formalin für jede Pathologie. Durch die vielfachen Einstellmöglichkeiten ist jede bis zu einem Liter gewünschte Menge abfüllbar, dadurch spart der Anwender Formalin und kann die Versandkosten reduzieren.

Vorteile:

- Integriertes Abzugssystem mit Aktivkohlefilter.
- Filterung durch Aktivkohlefilterplatten, kein Granulat, dadurch Reduzierung der Feinstaubbelastung.
- Spritzwassergeschützter Dosierschalter
- Elektronische Abfüllkontrolle von 1ml – 1000ml.
- Edelstahlrückschlagventil mit eingebautem Filter

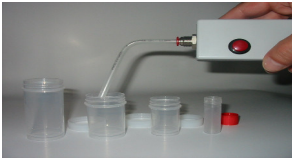

Auf Wunsch mit Handabfüllpistole.

Technische Daten:

Abmessungen des Gerätes (L/B/H) 300 x 220 x 160mm

Gewicht: 6,5 Kg

Anschlusswerte: 230V, 50Hz, 0,2 KW

Artikel Nr. 50010

Vorgefüllte Formalin Versandgefäße

Art-Nr.

Bezeichnung

02-1000



Formalin TWIN-Versandgefäße aus PP, Volumengröße 20 ml, zur Hälfte (50%) gefüllt mit Formalin 4% (gew.)phosphatgepuffert, Etikett mit Gefahrensymbol und Instituts-Adressaufdruck, LOT-Nr., 100 Stk. im Karton-Tray, 10 Trays im Versandkarton. VE:1000 Stück

02-1015



Formalin TWIN-Versandgefäße aus PP, Volumengröße 35 ml, zur Hälfte (50%) gefüllt mit Formalin 4% (gew.)phosphatgepuffert, Etikett mit Gefahrensymbol und Instituts-Adressaufdruck, LOT-Nr., 100 Stk. im Karton-Tray, 10 Trays im Versandkarton. VE: 960 Stück

Andere Größen auf Anfrage.

Qualität Made in Germany