



Paraffin-Ausgießstation 500

Modulare Ausgießstation

1. Modul Paraffinspendereinheit
2. Modul mit heizbarer Wanne für Kassetten und Förmchen
3. Modul Kühlplatte

Die verschiedenen Module können frei nach Wunsch angeordnet werden.

Die Paraffinspendereinheit verfügt über Beleuchtung, Kühlpunkt, Lupe und Bedienung per Fußschalter.

Zwei Schubladen zum Auffangen von Paraffin.

Anschlussmöglichkeit für heizbare Pinzetten. Fassungsvermögen Paraffinvorratstank 5 Liter.

Maße: 345 x 641 x 405mm (BxTxH)

Gewicht 21Kg



Kassettenmodul

Hier finden fast alle herkömmlichen Körbe aus Entwässerungsautomaten Platz.

Maße: 340 x 623 x 395mm (BxTxH) Gewicht 16Kg



Kühlplatte mit Platz für bis zu 60 Ausgießförmchen.

Temperatur regelbar 0 – 12°C

Maße: 335 x 623 x 395mm (BxTxH)

Gewicht 25Kg

Paraffin-Ausgießstation 350

Modulare Ausgießstation

1. Modul Paraffinspendereinheit mit heizbarer Wanne für Kassetten und Förmchen
2. Modul Kühlplatte

Die Paraffinspendereinheit verfügt über Beleuchtung und Kühlpunkt.

Zwei Schubladen zum Auffangen von Paraffin.

Fassungsvermögen Paraffinvorratstank 5 Liter.

Maße: 650 x 595 x 432mm (BxTxH)

Gewicht 28Kg



Kühlplatte mit Platz für bis zu 60 Ausgießförmchen.

Maße: 340 x 620 x 405mm (BxTxH)

Gewicht 25Kg

Qualität Made in EU

Paraffin-Ausgießstation



Modulare Ausgießstation
 Paraffinspendereinheit mit 2 heizbaren Wannen für Kassetten und / oder Ausgießformen, regelbarem Paraffinauslauf, Beleuchtung, Lupe und Kühlpunkt.
 Fassungsvermögen Paraffinvorratstank 4,5 Liter.
 Integrierte Wochenzeitschaltuhr.
 Technische Daten:
 Spendereinheit: B560 x T640 x H400mm, 230V/50Hz/1KW
 Max. 70 C, 4,5 Liter Paraffinvorratstank
 Artikel Nr.: AGS20



Großer 4,5 Liter Paraffintank

Anschluss für eine heizbare Pinzette
 Kassettenwanne (160x190x40mm)
 Beleuchtung
 Kühlpunkt

beheizte Schubladen




Optional:
 Kühleinheit zum kühlen der Kassetten bis max. -13 C.
 Kühleinheit: B300 X T540 x H400mm, 230V/50Hz/0,4KW
 Max. -13 C.
 Artikel Nr.: AGS20KP



Optional:
 Eine zusätzliche heizbare Wanne zur Aufnahme der Kassetten, groß genug um die meisten Körbe herkömmlicher Entwässerungsautomaten aufzunehmen.
 Wärmeeinheit: B300 X T600 x H400mm, 230V/50Hz/0,4KW
 Max. 70 C, Kapazität 2,5 Liter
 Artikel Nr.: AGS20WP

Verschiedene Heizbare Pinzetten

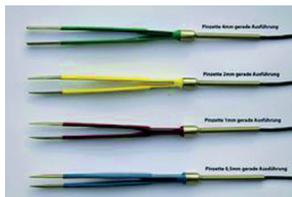

Qualität Made in Germany

Cassettes Trim




Einbettkassetten Reinigungsgerät

Reinigt die Kassetten nach dem Ausgießen von überschüssigem Paraffin um ein problemloses Einsetzen in die Spannkammer des Mikrotoms zu ermöglichen.
 Vorteile:
 Kein Kratzen mit dem Messer mehr nötig.
 Keine herumfliegenden Paraffinreste
 Keine verkratzten Nummern oder Barcodes.

Technische Daten:
 Gewicht: 2,7Kg
 Maße: 240 x 160 x 170mm (T/B/H)
 Temperatur: max. 75 C
 230V 50Hz 0,1 KW
 Artikel Nr.: CT200

Elektrisch beheizbare Pinzetten.

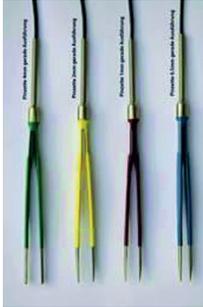

Passend zu der Pinzetten-Station können sie Pinzetten in den Größen von 0,5mm bis 4mm anschließen. Die einzelnen Pinzetten sind, zur einfachen Orientierung, je nach Größe farblich markiert. Alle Pinzetten werden nur an der Spitze auf ca. 68 Grad erhitzt. Das Anschlusskabel ist hitzebeständig bis 80 Grad, hoch- flexibel, und resistent gegen Paraffin. Es können zwei verschiedene Pinzetten gleichzeitig betrieben werden.


Bestellnummern:

4709205 (0,5 Pinzette) blau

4709210 (1 mm Pinzette) rot

4709220 (2 mm Pinzette) gelb

4709240 (4 mm Pinzette) grün

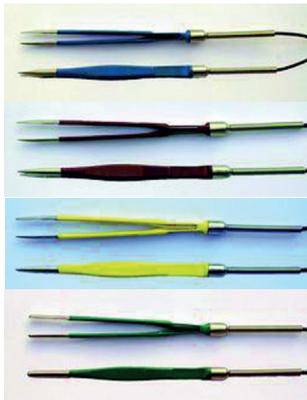

Ergonomisch gebogene Pinzette 0,5mm blau

Abgewinkelte Pinzette 0,5mm blau

Alle Pinzetten können auch an unserer Ausgießstation angeschlossen werden.

Elektrischer Anschluss: 24V DC 0,34A